

NEWS RELEASE

「抱え上げない介護」を促進 ベッド設置式リフトを発売

パラマウントベッド株式会社(東京都江東区、代表取締役社長:木村友彦)は2021年12月1日、ベッド設置式介護リフト「エレベオ」を発売します。介助者の身体的負担の軽減とともに、操作性や利用者の快適性も迫りました。

介護リフトは、ベッドから車いすやポータブルトイレなどへ利用者の体を持ち上げて移動させる福祉用具です。「エレベオ」は、ベッド設置式の介護リフトで、ベッドに設置した支柱を軸にアームを回転させ、アームの先にあるハンガーを垂直に上下し利用者を移乗させます。部屋のレイアウトや使い方に合わせて、ベッドの頭側・足側、右側・左側、いずれにも取り付けが可能で、当社在宅用介護ベッドに適合します(一部機種を除く)。

最大の特長はリフト用の手元スイッチでリフトだけでなく、ベッドの高さ調整も行えることです(KQ-788L限定)。介助者が手元スイッチを持ち替えることなく、利用者から手を離さずにスムーズな介助が可能となります。

さらに、降ろしたい位置に利用者を降ろせるアームの長さや介助スペースを確保するための支柱の位置やフレーム形状を追求しました。アームは、昇降する利用者の腰の位置がベッド中央(リクライニング時の床板の屈曲位置)に来る長さに設計。また、支柱やフレームが介助者の動きを遮らない位置に設置することで、作業スペースを確保し、より利用者に近づいた介助が可能となります。価格、仕様は別紙の通りです。



【背景】介護の現場では、無理な姿勢での移乗動作などによる、介助者の腰痛が大きな問題となっています。近年、利用者を力任せに抱え上げずに、福祉用具を利用する安全な介助方法「ノーリフティングケア」を実践する高齢者施設が多くあります。介護する方・される方両者にとって、安心して安全に介護を行うためには、介護リフトをはじめとした移乗用具の活用が効果的です。

全体が傾斜する在宅向け介護用ベッド「楽匠プラス」に設置した「エレベオ」。

リフトとベッドの上げ下げが行える手元スイッチ。

本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド(株)
広報部 岡村曜子
Mail: pb-pr@paramount.co.jp
TEL: 03-3648-1111
FAX: 03-3648-5781


※記載されている情報は発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

別紙

【主な特長】

① ベッドも上下できる手元スイッチ

エレベオの手元スイッチではリフトの上下とベッドの高さ調節がおこなえます。ベッドの高さを下げれば、利用者の目線の高さを変えずに吊り上げられ、目線が上がる際の不安を軽減します。また、介助者が手元スイッチを持ち替えることなく、利用者から手を離さずにスムーズに介助できます。

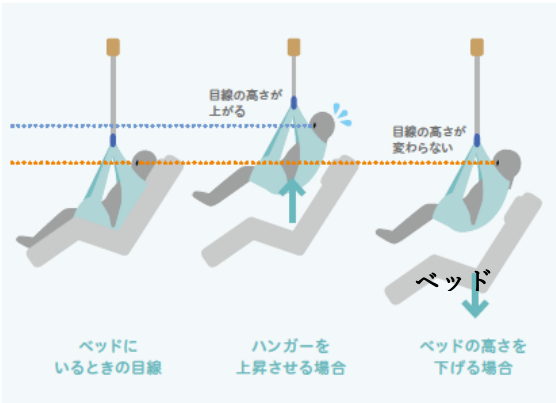

② 足元スッキリ、作業のしやすさと安全性に配慮

片側の側面にフレームがない構造のため、介助者の足元に作業スペースを確保できます。一歩踏み込んで利用者に近い位置でサポートできます。またリフトを設置したまま、ベッドサイドテーブルを利用できます。



【各パーツの名称と機能】

緊急停止レバー

緊急停止レバーを引き続けると、ハンガーがゆっくりと下がります。緊急停止レバーを押し戻すと、通常の使用状態になります。

本体スイッチ

昇降ユニットにも操作ボタンがついています。

ハンガー

ハンガー部分が垂直に昇降する方式を採用しています。また、手元スイッチはハンガーに掛けておくことができます。

アーム

アームは105°の可動範囲で自由に動かせます。なおエレベオをどの位置（ベッドの頭側・足側、右側・左側）に設置しても、ハンガーはベッド中央に来ます。（一部機種限定）

昇降ユニット

昇降ユニットからベルトが伸びハンガー部分が昇降します。本体は昇降しないため、介助する方にとって作業の邪魔になりにくい仕様です。



製品名製品	コード	ベッド接続ケーブル	全長	全幅	全高	希望小売価格
ベッド設置式リフト エレベオ	KQ-788L	付属*	216cm	162cm	210cm	オープン価格（非課税）
	KQ-788S	なし				オープン価格（非課税）

* 適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。

※記載されている情報は発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。